


ODBĚR BUKÁLNÍHO STĚRU INSTRUKCE



Před odběrem přibližně hodinu nic **nejezte**, **nepijte** (mimo vody), **nežvýkejte** ani neprovádějte ústní hygienu.




Umyjte si důkladně ruce.

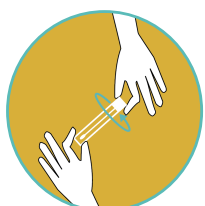

Tabu **otevřete protisměrným otáčením** podél čárkované linie; poté vytáhněte část obsahující tyčinku s vatovým tamponem z obalu.

Vždy mějte otevřenou jen jednu tabu, aby nemohlo dojít k záměně vzorků.

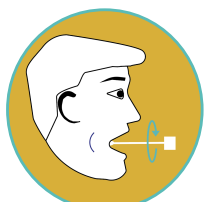

Opakovanými pohyby nahoru a dolů (alespoň 10krát) **stírejte v ústní dutině povrch vnitřních stran obou lící**, přičemž otáčejte tyčinkou tak, aby se stěrem pokryl celý její povrch. Pokud se Vám tvoří v ústech sliny, polkněte (setřít sliny tyčinkou není žádoucí).


Tyčinka se nesmí dotknout ničeho jiného, především ne rukou jiné osoby. Nevadí však, pokud se dotknete zubů nebo jazyka osoby, které se dělá odběr.



Tyčinku spolu s příslušnou tabu **postavte do sklenice** a nechte vysušit nejméně jednu hodinu. Zajistěte, aby se tyčinky nikdo nedotkl.

Pokud vzorek nemůžete vysušit ihned po odběru, vložte ho zpět do taby a vysušte při nejbližší příležitosti, nejpozději 4-5 hodin po odběru.

V jedné sklenici sušte vždy jen jednu tyčinku, aby nedošlo k záměně vzorků.

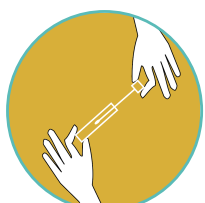

Vysušené vzorky uzavřete a na zkumavku napište své jméno nesmývatelným fixem. Vložte zkumavku do uzavíratelného sáčku a následně do přiložené zpětné obálky spolu s pečlivě vyplněnými dokumenty. Vzorky zašlete v nejbližším možném termínu zpět na adresu GHC Genetics.

V případě, že budou Vaše vzorky doručeny bez potřebné dokumentace, nemohou být zpracovány. Před odesláním uchovávejte vzorky za pokojové teploty. Nevkládejte je do lednice.